

Biztonsági előírások

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltozik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A termék a bőr alapos tisztítására szolgál. Nem mindennapos használatra tervezték, hetente legfeljebb 2-szer alkalmazható.

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra, pl. kozmetikai stúdiókban, nem használható. Gyógyászati kezelésekre nem alkalmas.

A készüléket csak száraz, belső helyiségekben használja.

Ne használja a készüléket ...

... közvetlenül olyan bőrfelületen, amelyen nyílt seb, égési sérülés, bőrkiütés, bőrduzzanat vagy irritáció, pikkelysömör, sérülés, fertőzés (hólyagosodás), májfolt vagy szemölcs található,

... a szemhéjakon, ajkakon, mellbimbón, a nemi szerveken,

... napozás után (várjon min. 1-3 napot),

... bőrbetegségek, pl. rosacea esetén,

... vérellátási zavarok, cukorbetegség, tuberkulózis, daganat, zúzódás, arcidegzsába, pajzsmirigy megbetegedése, herpesz esetén,

... műtét után,

... orvos által felírt, bőrön alkalmazott gyógyszer 6 hónapon belül történt használata esetén,

... ha az elmúlt 3 hónapban sugárkezelést vagy kemoterápiát kapott,

... olyan bőrfelületen, ahol elképzelhető, hogy rosszindulatú tumor van jelen,

... teresség alatt,

... ismeretlen eredetű fájdalom esetén.

Ha kétségei lennének, a használat előtt kérje ki orvosa tanácsát.

Vigyázat nem megfelelő használat esetén

• Ne használja a készüléket a szem közvetlen közelében! A bőr ott nagyon vékony és érzékeny. Ezt a területet hagyja ki.

Ne nyomja a fejezet túl erősen a bőrére.

• Ne tartsa huzamosabb ideig a szívófejet a bőr egy helyén, hanem egyenletesen mozgassa a készüléket a bőrön, különben véraláfutásos lehet a bőr.

• Az érzékeny bőrű személyeknél előfordulhat bőrduzzanat/-irritáció. Szükség esetén először próbálja ki a készüléket egy kevésbé érzékeny területen, pl. az alkar alsó részén.

• Kezdetben csak rövid ideig és alacsony intenzitással használja a készüléket, hogy az esetleges reakciók fellépését a lehető legcsekélyebb mértékűre csökkentse. A használat kezdetben ne haladja meg a 2 percet később az 5 percet.

Veszély gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

• A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és olyan személyek, akiknek fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességeik korlátozottak, illetve akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal vagy megfelelő ismeretekkel, csak felügyelet mellett vagy csak akkor használhatják, ha annak biztonságos használatáról útmutatást kaptak, és az abból eredő lehetséges veszélyeket megértették.

• Felügyelje a gyerekeket, hogy ne játsszanak a készülékkel.

• A készüléket kisgyermeken használni tilos, mivel nagyon érzékeny a bőrük.

• Gyermekek nem végezhetik a készülék tisztítását, kivéve, ha 8 évesnél idősebbek és a folyamat közben felügyelik őket. A készülék karbantartást nem igényel.

• Ne engedje, hogy a csomagolóanyag és a termék apró részei gyermekek kezébe kerüljenek. Többek között fulladásveszély áll fenn!

Veszély elektromos áram következtében

• A terméket csak száraz belső helyiségekben szabad tölteni. A töltéshez egy megfelelő USB-hálózati adaptert használjon (lásd „Műszaki adatok”, nem tartozék) és csak a mellékelt mikro-USB-töltőkábelt.

• Ne töltsd a készüléket víz közelében. A készülék nem érintkezhet vízzel vagy egyéb folyadékkal, ha az csatlakoztatva van az áramhálózathoz. A töltés során ne merítse a terméket vízbe vagy egyéb folyadékba, mert áramütés veszélye áll fenn.

• Ha a készülék töltés közben vízbe esik, ne nyúljon utána! Húzza ki azonnal a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból. Várjon, amíg teljesen megszárad a készülék, az USB-töltőkábel és a hálózati adapter, csak ezután csatlakoztassa újra az áramhálózatra.

• Ne töltsd a készüléket a szabadban vagy magas páratartalmú helyiségekben.

• Soha ne fogja meg nedves kézzel a hálózati adaptert, amikor bedugja a csatlakozóaljzatba, illetve kihúzza belőle.

• Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amelynek a hálózati feszültsége megegyezik a hálózati adapter műszaki adataival.

• Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzattól, ha töltés közben üzemzavar lép fel, amint a készülék feltöltődött, vihar esetén és mielőtt megtisztítja a készüléket. Mindig a hálózati adaptert húzza, ne az USB-töltőkábelt.

• Csak a mellékelt USB-töltőkábelt vagy egy olyan hálózati adaptert használjon, amely megfelel a készülék műszaki adatainak.

• A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati adaptert. Úgy helyezze el az USB-töltőkábelt, hogy véletlenül se ránhassa le a készüléket.

• Az USB-töltőkábelt nem szabad megtörni vagy összenyomni. Tartsa távol forró felületektől és éles széléktől.

• Ne használja a készüléket, ha látható sérülések vannak rajta, vagy ha leesett.

• Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A készüléken, a töltőkábelelem és a hálózati adapteren szükséges javításokat bízva szakszer-vizre.

Sérülésveszélyek

• A készülék beépített lítiumion akkumulátort tartalmaz. Az akkumulátort saját kezűleg nem lehet és nem szabad kicserélni.

• A terméket szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos. Robbanásveszély áll fenn!

Anyagi károk

• A készüléket ne merítse vízbe vagy más folyadékba. Óvja csepegő és spriccelő víztől egyaránt.

• Minden használat után tisztítsa meg alaposan a masszírozó felületet, ahogyan az „Tisztítás” fejezetben le van írva, így elkerülhető a zsír- és más maradványok lerakódása.

• A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.

Hulladékkezelés



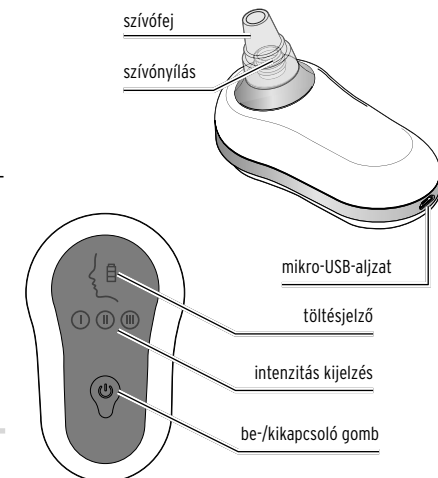
Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi,

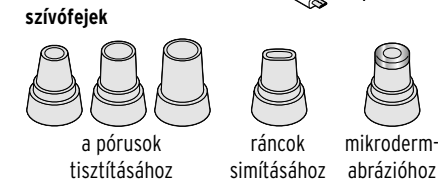
nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Az elhasználandó elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni. Az ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítium elemek/akkumulátorok érintkezőit.

Figyelem! Ebben a készülékben egy olyan akkumulátor található, amely biztonsági okokból szilárdan be van építve és a burkolat megrongálása nélkül nem lehet eltávolítani. A szakszerűtlen eltávolítás biztonsági kockázatot jelent. Ezért a készüléket adja le egészben egy gyűjtőhelyen, ahol a készüléket és az akkumulátort szakszerűen ártalmatlanítják.

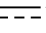
Termékrajz (tartozékok)




kép nélkül:
5 tartalék tömitőgyűrű
50 tartalék szűrő



Műszaki adatok

Modell:	653 374
Akkumulátor:	lítiumion 3,7 V / 450 mAh
(az UN 38.3 alapján tesztelve)	névleges energia: 1,665 Wh
USB-aljzat:	5 V  1000 mA
Töltési idő:	kb. 2 óra
Üzemidő:	kb. 1 óra

Érintésvédelmi osztály: III 

Környezeti hőmérséklet: +10 és +40 °C között

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.hu



Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.

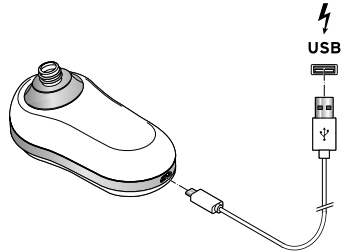


Akkumulátor feltöltése

Az első használat előtt teljesen fel kell tölteni az akkumulátort. Töltési idő: kb. 2 óra. Ekkor a készülék legyen kikapcsolva. Ne használja a készüléket töltés közben.

VIGYÁZAT - életveszély áramütés következtében

Ne töltsa a készüléket közvetlenül vízzel teli mosdókagyló mellett vagy felett.




1. Csatlakoztassa az USB-töltőkábel a készülékhez és egy megfelelő USB-hálózati adapterhez (lásd „Műszaki adatok”).

2. Dugja be a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatba.

Töltés közben a töltésjelző villog. Amint az akkumulátor teljesen feltöltődött, folyamatosan világít.

3. Töltés után húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzataból, majd húzza ki az USB-töltőkábel a készülékből.

Max. töltési idő: kb. 2 óra
Üzemidő teljesen feltöltött akkumulátorral: kb. 1 óra.
Ha a készülék használat közben leáll, mert lemerült az akkumulátor, akkor először teljesen fel kell tölteni az akkumulátort, mielőtt ismét használható a készülék.

 Az akkumulátor kapacitásának megtartása érdekében az akkumulátort 2-3 havonta töltsa fel teljesen akkor is, ha nem használja a készüléket.

Az akkumulátort +10 és +40 °C közötti hőmérsékleten töltsa.

Használat

FIGYELEM - bőrirritáció

- Ne használja a készüléket a szem közvetlen közelében! Ezt a területet hagyja ki.
- Az érzékeny bőrű személyeknél előfordulhat bőrduzzanat/-irritáció. Szükség esetén először próbálja ki a készüléket egy kevésbé érzékeny területen.
- Kezdetben csak rövid ideig és alacsony intenzitással használja a készüléket, hogy az esetleges reakciók fellépését a lehető legcsekélyebb mértékűre csökkentse. A kezelés az arc teljes felületén eleinte 2 percig, később legfeljebb 5 percig tartson.
- A bőrirritáció megelőzése érdekében ne tartsa a készüléket túl sokáig egy helyen.

Az első használat előtt

Szükség esetén először próbálja ki a készüléket egy kevésbé érzékeny területen, pl. az alkar alsó részén. Azután várjon kb. 30 percet, hogy jelentkez-e bármiféle bőrreakció, és csak utána kezdjen neki a tényleges kezelésnek.

Szívófej kiválasztása

Mikrodermabrázió

A mikrodermabrázió során finoman eltávolítjuk a bőr legfelső, elszarusodott rétegét úgy, mint a hámlasztásnál. A készülék eltávolítja az elhalt hámsejteket, kisimítja a durvább bőrfelületet és a kisebb ráncokat, a bőr üdőbbé, simábbá válik.

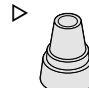
Vákuumkezelés

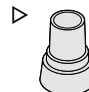
A vákuumkezelés során ...

... a felszínre kerülnek a szennyeződések, ... az elhalt sejteket a készülék leszívja és ... a felülénkült vérkeringés következtében arca üdőbb lesz.

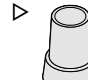
A mikrodermabrázióhoz használja a fémgyűrűs szívófejet.


A vákuumkezeléshez mind a 4 mellékelt szívófejet használhatja.

 Eltömődött pórusok tisztításához alacsony szívóerővel. Ideális a bőr hozzászoktatásához a kezelésekhöz a kezdetekben, valamint nagyon finom, érzékeny bőrűkhöz.

 Eltömődött pórusok és aknák tisztításához. Használat közepes szívóerőn.

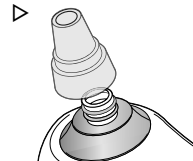
Gennyes pattanások tisztításakor minden egyes pattanás után tisztítsa meg a fejet, hogy megakadályozza a pattanások további terjedését.

▷ Alaposabb kezeléshez a legmagasabb szívóerőn. Ideális mitesszerek eltávolításához zsíros bőr esetén.

▷ Ráncok kisimításához és masszírozáshoz és bőrfeszítéshez.

▷ Mikrodermabrázióhoz.

Szívófej cseréje


▷ Szükség esetén húzza le egyenesen felfelé a gyárilag felszerelt fejet a készülékről, majd dugja rá a kiválasztott fejet.

Használat


Előkészítés

1. Tisztítsa meg az arcát alaposan, majd törölje jól szárazra. Bőre legyen tiszta, száraz, valamint púdertől, krémtől és hasonlóktól mentes.

2. **Csak eltömődött pórusok tisztításához:** A pórusok megnyitásához meleg vízzel nedvesítsen be egy törölközőt, és egy pár percig helyezze az arcára.

 Az első 2-3 használat során ...

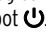
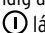
... használja a kis kerek fejet, melynek kisebb a szívóereje.

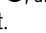
... a készüléken a legalacsonyabb intenzitás fokot állítsa be .


Először próbálja ki egy kisebb bőrfelületen. Ha ekkor vagy akár később panaszok lépnek fel, azonnal hagyja abba a kezelést. Kérje ki orvosa véleményét!

Egy teljes kezelés eleinte 2 percig, később legfeljebb 5 percig tartson. A készüléket hetente legfeljebb kétszer használja.

Készülék bekapcsolása és az intenzitásszint kiválasztása

▷ A készülék bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot . A készülék mindig az alacsony intenzitáson indul el. A  látható a kijelzőn.

▷ Nyomja meg többször röviden a be-/kikapcsoló gombot , amíg be nem állította a kívánt intenzitást.

▷ A készülék kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot .

Arc kezelése

1.



Kapcsolja be a készüléket, és helyezze úgy az arcára, hogy bőre lezárja a szívófejet, és ne tudjon levegő távozni vagy beszívódni,

illetve érezhető legyen a szívóerő. Kezelés közben mozgassa folyamatosan a készüléket - ne tartsa hosszabb ideig egy helyen, különben vérálfutás keletkezhet.



2. Simítsa végig az adott bőrfelületet a szívófejjel a képeken ábrázolt módon a nyílak irányában - eleinte 2-4-szer, majd ha a bőre hozzászokott a kezeléshez, akkor 4-6-szor. Szabad kezével szükség szerint egy kissé feszítse meg a bőrt. Kövesse az arc formáját. Ne nyomja rá túl erősen! A szemek környékén legyen különösen óvatos!

Kezelés után

▷ Mossa meg az arcát hideg vagy legfeljebb langyos vízzel. Szükség szerint használhat feszesítő hatású arctisztítót, ezzel eltávolítja a maradványokat és lezárja a nyitott pórusokat.

▷ Használjon hűsítő, bőrnugtató arcmaszkot vagy hidratálókrémet.

▷ Kezelés után bőre a szokásosnál puhább és érzékenyebb. Kerülje a közvetlen napfényt. Szükség esetén használjon magas fényvédő faktorú krémet.

▷ Higiéniai okokból készüléket minden használat után alaposan meg kell tisztítani a „Tisztítás” fejezetben leírtak szerint. Így eltávolítja a zsírlerakódásokat és más maradványokat.

Lehetséges mellékhatások

Ha Ön ezen útmutató szerint jár el, és figyel bőre reakciójára, akkor nem valószínű, hogy komplikáció vagy mellékhatás alakulna ki. Azonban minden ember másként reagál a pórustisztító mechanikai behatására, amely pozitívan befolyásolhatja a vérellátást, de a túlzott igénybevétel allergiás reakciókhoz, a bőr kipirosodásához, kisebb véreerek megpattanásához és vérömlenyhez vezethet.

Ha ezek 1-2 napon belül nem tűnnek el, vagy más panaszok is jelentkeznek, forduljon kezelőorvosához.

Tisztítás

▷ Higiéniai okokból minden használat után azonnal tisztítsa meg alaposan a készüléket, hogy eltávolítsa a zsírlerakódást és más maradványokat.

Gennyes pattanások tisztításakor minden egyes pattanás után tisztítsa meg a fejet, hogy megakadályozza a pattanások további terjedését.

1. Kapcsolja ki a készüléket.

2. Húzza le a szívófejet, mossa meg alaposan enyhén szappanos vízben, majd öblítse le alaposan meleg folyó víz alatt. Várja meg, amíg minden rész megszárad, mielőtt újra használja vagy elpakolja őket.

3.  Vegye ki a szívacsűrőt a szívónyílásból, és öblítse ki. Hagyja teljesen megszáradni, mielőtt visszahelyezi.

▷ A csomagban 50 tartalék szűrőt talál. Cserélje ki a szűrőt, ha megsérült vagy elszennyeződött.

▷ A tömítőgyűrűket általában nem szükséges cserélni. Az alapos tisztításhoz azonban levehető. Ha egy tömítőgyűrű megsérült, cserélje ki a tartalék gyűrűk egyikével.

4. Alaposan törölje tisztára a készüléket és főleg a szívónyílás körülöttei részt egy nedves kendővel. A nyílás belsejébe egy enyhén nedves fültisztító pálcikával tisztíthatja meg.