




3 az 1-ben mini masszírozó készülék

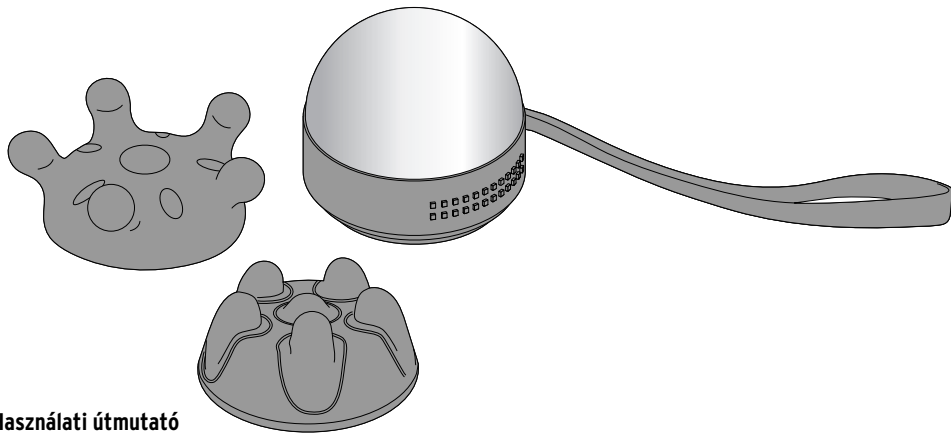

Használati útmutató

Tartalom

Kedves Vásárlónk!

Új mini masszírozó készüléke 3 cserélhető fejjel hozzásegíti Önt a jóleső ellazuláshoz. A készülék kicsi és könnyen kézre áll, így egyszerűen magával viheti.

Kívánjuk, legyen öröme a termék használatában!

A Tchibo csapata



www.tchibo.hu/utmutatok

3	Biztonsági előírások
6	Termékrajz (tartozékok)
7	Elemek behelyezése
7	Masszírozó fejek levétele / felhelyezése
8	Használat
8	Tisztítás és fertőtlenítés
9	Műszaki adatok
9	Üzemzavar / Hibaelhárítás
10	Hulladékkezelés

Biztonsági előírások



Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A mini masszírozó készüléket mindennapi önmasszázsához, a közérzet javítására tervezték.

A mini masszírozó készüléket magáncélú használatra tervezték.

Nem alkalmas klinikákon, masszázs rendelőkben, wellness stúdiókban, stb. történő használatra. A mini masszírozó készülék nem gyógyászati eszköz és nem fájdalom kezelésére szolgál. Amennyiben kétségei támadnának vagy elbizonytalanodna az alkalmazást illetően, a használat előtt kérje ki orvosa véleményét.

- A készüléket kizárólag ...
... a test külső kezelésére használja.
- ... csak a rendeltetésének megfelelő célra és a használati útmutatóban leírt módon használja. Minden nem rendeltetésszerű használat veszélyes lehet!

VESZÉLY gyermekek esetében

- A készüléket nem használhatják gyermekek és olyan személyek, akik fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességeik miatt, illetve kellő tapasztalat vagy megfelelő ismeretek hiányában nem képesek biztonságosan kezelni azt. Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Egy elem lenyelése 2 órán belül súlyos belső, marási sérüléseket és akár halált okozhat. Ezért az új és a használt elemeket, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol kisgyermekek nem férnek hozzá. Egy elem esetleges lenyelése esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön.
Többek között fulladásveszély áll fenn!
- A termék nem játékszer. Gyermekektől tartsa távol.

Az egészségkárosodás megelőzése érdekében az alábbi esetekben ne használja a készüléket:

Ne használja a masszázs készüléket ...

- ... terhesség idején.
- ... a masszírozandó terület kóros elváltozása vagy sérülése esetén (pl. zúzódás, gyulladás, nyílt sebek, porckorongsérv stb.).
- ... olyan anyagok bevétele után, amelyek korlátozzák az érzékelő képességet (pl. fájdalomcsillapító gyógyszer, alkohol).
- ... a szemén és a szem környékén, a gégén, csontokon vagy ízületeken, a nemi szervek és a vesék területén vagy egyéb különösen érzékeny testrészen.
- ... állatokon.
- ... az ágyban fekve.
- ... a készülék látható sérülése esetén.

A készülék használata előtt kérje ki orvosa véleményét, különösen,

- ... ha súlyos betegségben szenved, vagy a közel-múltban operálták.
- ... ha szívritmus-szabályozóval, implantátummal vagy más segédeszközzel rendelkezik,
- ... trombózis esetén,
- ... cukorbetegség esetén,
- ... ismeretlen eredetű fájdalmak esetén.
- A masszázs időtartama legfeljebb 20 perc lehet.
A hosszabb masszírozás az izmokat túlságosan stimulálhatja. Egyes esetekben a kívánt ellazulás helyett a masszírozott izmok megmerevedhetnek.
- Ha a használat közben fájdalom vagy bőrkütés jelentkezik, azonnal fejezze be a masszázst és ne használja tovább a készüléket.

A biztonságos használat érdekében vegye figyelembe a következő utasításokat:

- A készülét üzemzavar vagy sérülés esetén szakszervízben javíttassa meg.
- Ne hagyja a készüléket sokáig ugyanazon a felületen. Körkörös mozdulatokat végezzen vele.
- A bekapcsolt készüléket soha ne hagyja felügyelet nélkül.

VIGYÁZAT - tűz- és robbanásveszély


- Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.
- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet mossa le tiszta vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.

FIGYELEM - könnyű sérülések és anyagi károk


- Óvja a készüléket a nedvességtől. A készüléket ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- Óvja az elemeket és a terméket a túlzott hőtől. Tartsa távol a készüléket a hőforrásoktól, pl. tűzhelytől vagy sütőtől.

- Vegye ki az elemeket a termékből, ha az elhasznált, vagy ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerülhetőek a kifolyt sav okozta károk.
- Mindig cserélje ki az összes elemet. Ne használjon régi és új, különböző típusú, márkájú vagy kapacitású elemeket.
- Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polarításra (+/-).
- Ha a készülék beleesett a vízbe, akkor nem használható tovább.
- A tisztításhoz ne használjon erős vegyszereket, illetve maró vagy súroló hatású tisztítószeret.


Termékrajz (tartozékok)

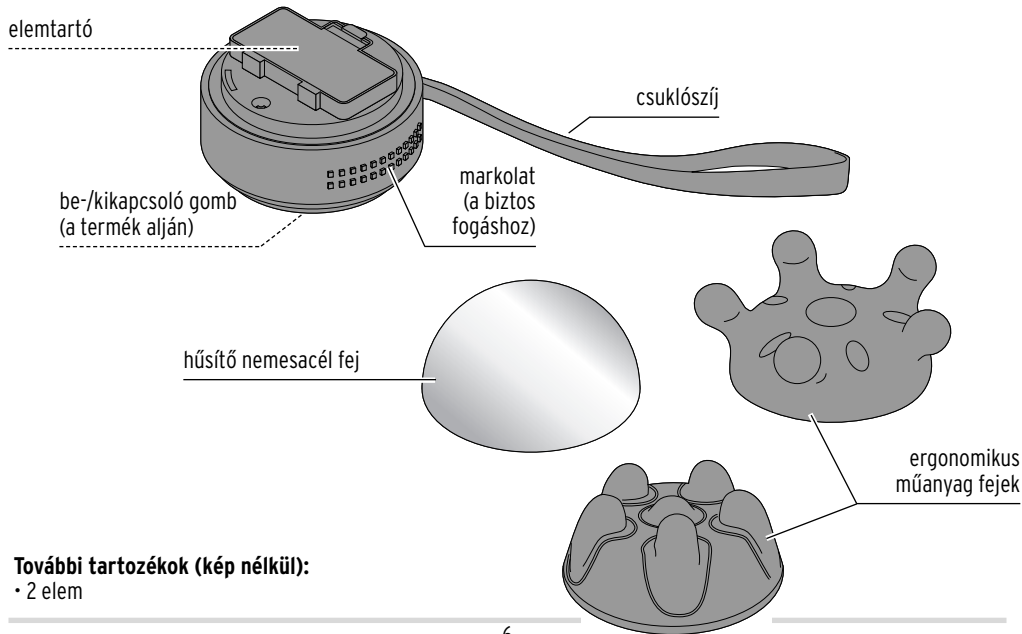

Elemek behelyezése

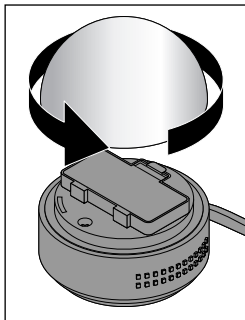

1. Tekerje le a készülékről a fejet az óramutató járásával ellentétes irányban.

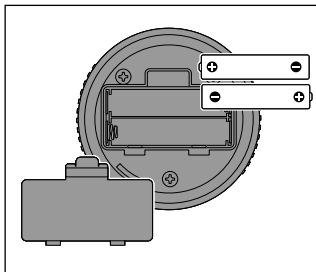


2. Nyomja lefelé a nyelvet az elemtartó fedelén, majd vegye le a fedelet felfelé.

3. Az ábrázolt módon helyezze be az elemeket az elemtartóba. Ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).
4. Tegye vissza az elemtartó fedelét. Hallhatóan és érezhetően be kell kattannia.


Masszírozó fejek levétele / felhelyezése

Masszázsfej levétele

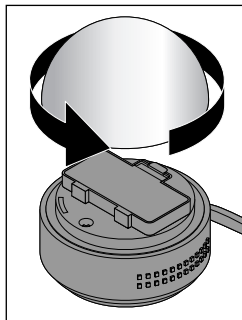


- ▷ Tekerje le a készülékről a fejet az óramutató járásával ellentétes irányban.

Masszázsfej felhelyezése

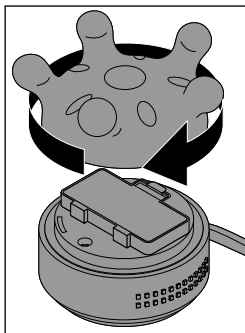


- ▷ Tekerje a fejet az óramutató járásával megegyező irányban ütközésig.

Használat

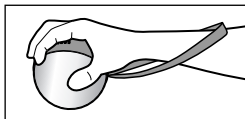

1. Dugja át a kezét a csuklószíjon, és markolja meg a masszírozó készüléket az ábrán látható módon.

2. A masszírozó készülék bekapcsolásához nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot  a termék alján.

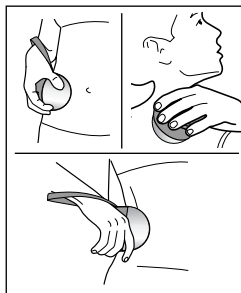

3. Helyezze a készüléket a masszírozandó testrészre. Nyomja a készüléket gyengéden, vagy akár kissé erősebben a bőrre, így tudja a masszázs intenzitását változtatni.

4. A masszírozó készülék kikapcsolásához nyomja le ismételten a ki-/bekapcsoló gombot  a készülék alján.

Tisztítás és fertőtlenítés

FIGYELEM - anyagi károk

A készüléket ne merítse vízbe vagy más folyadékba.

- ▷ Amennyiben szükséges, törölje át a készüléket egy vízzel enyhén benedvesített kendővel.

- ▷ Szükség esetén fertőtlenítésként törölje át a maszsírozó fejeket egy etilalkohollal enyhén megnedvesített kendővel. Etilalkoholt a gyógyszerértárban kaphat.

Műszaki adatok

Modell: 381 449
Elem: 2 db LR03(AA)/1,5V típusú
Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Üzemzavar / hibaelhárítás

Nem kapcsolható be a készülék.

- Elhasználódott az elem?
 - Megfelelően van behelyezve az elem?
Ügyeljen a polaritásra (+/-).
 - Helyesen van felhelyezve az elemtartó?
-

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elemek értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** kidobása során ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő hulladékgyűjtőkkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék!

Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasználódott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.

Cikkszám:

381 449
