


Masszírozó készülék, vízálló

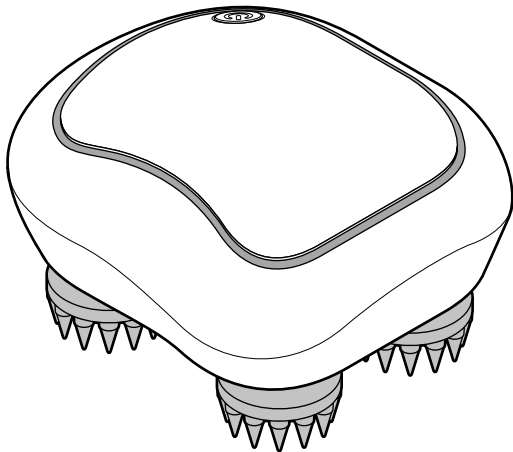

hu Használati útmutató

118357AB1X1XII · 2021-08

Kedves Vásárlónk!

Új masszírozó készüléke enyhítheti a fej, a nyak és a test izmainak a feszültségét. A különböző masszázsfajokkal és választható sebességekkel egyénileg beállíthatja az Ön közérzetének megfelelő masszázst. A masszírozó készülék használható a zuhanyzóban vagy kádban is.

Tartalom

- 2 Megjegyzések az útmutatóhoz
- 3 Biztonsági előírások
- 7 Termékrajz (tartozékok)
- 8 Akkumulátor feltöltése
- 9 Használat
- 10 Tisztítás és fertőtlenítés
- 11 Hulladékkezelés
- 12 Műszaki adatok

Megjegyzések az útmutatóhoz

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválnak a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.



Ez a jel sérülésveszélyre utal.



Ez a jel az elektromos áram használatából adódó sérülésveszélyre utal.

A **VESZÉLY** szó esetleges súlyos sérülésekre és életveszélyre utal.

A **VIGYÁZAT** szó sérülésekre és súlyos anyagi károokra utal.

A **FIGYELEM** szó könnyebb sérülésekre vagy rongálódásokra utal.



A kiegészítő információkat így jelöljük.

Biztonsági előírások

Rendeltetés

- A termék önmasszírozásra a közérzet javítására szolgál.
- A termék használható a zuhany alatt vagy a fürdőkád-ban (IPX7 védelmi osztály - időszakos vízbe merítés ellen védett).
- A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.
Nem alkalmas klinikákon, masszázs rendelőkben, wellness stúdiókban stb. történő használatra. A masszírozó készülék nem gyógyászati eszköz és nem fájdalom kezelésére szolgál. Amennyiben kétségei támadnának vagy elbizonytalanodna az alkalmazást illetően, a használat előtt kérje ki orvosa véleményét.
- A készüléket kizárólag ...
 - ... a testen csak külső használatra, illetve
 - ... csak a rendeltetésének megfelelő célra és a használati útmutatóban leírt módon használja. Minden nem rendeltetésszerű használat veszélyes lehet!

VESZÉLY gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

- A készüléket nem használhatják gyermekek és olyan személyek, akik fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességeik miatt, illetve kellő tapasztalat vagy megfelelő ismeretek hiányában nem képesek biztonságosan kezelni azt. Felügyelje a gyerekeket, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

Az egészségkárosodás megelőzése érdekében az alábbi esetekben semmiképpen ne használja a készüléket:

- Ne használja a masszírozó készüléket, ...
 - ... terhesség alatt.
 - ... a masszírozandó terület kóros elváltozása vagy sérülése esetén (pl. zúzódás, gyulladás, nyílt sebek, porckorongsérv stb.).

- ... olyan anyagok bevétele után, melyek befolyásolják az érzelési képességet (pl. fájdalomcsillapítók, alkohol).
- ... a szemén és a szem környékén, a gégen, a csontokon vagy ízületeken, a nemi szervek és a vesék területén vagy egyéb különösen érzékeny testrészen.
- ... állatokon.
- ... az ágyban fekve.
- ... a készülék látható károsodása esetén.
- A készülék használata előtt kérje ki orvosa véleményét, különösen akkor,
 - ... ha súlyos betegségben szenved, vagy a közelmúltban operáltak.
 - ... ha szívritmus-szabályozóval, implantátummal vagy más segédeszközzel rendelkezik.
 - ... trombózis esetén.
 - ... cukorbetegség esetén.
 - ... ismeretlen eredetű fájdalom esetén.

- A masszázs időtartama legfeljebb 20 perc lehet. A hosszabb masszírozás az izmokat túlságosan stimulálhatja. Egyes esetekben a kívánt ellazulás helyett az izmok megmerevedése fordulhat elő.
- Ha a használat közben fájdalom vagy bőrkkiütés jelentkezik, azonnal fejezze be a masszázst és ne használja tovább a készüléket.

A biztonságos használat érdekében vegye figyelembe a következő utasításokat:

- Üzemzavar vagy sérülés esetén a készüléket egy szakszervizben javíttassa meg.
- Ne hagyja a készüléket sokáig ugyanazon a felületen. Körkörös mozdulatokat végezzen vele.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül bekapcsolva a készüléket.

VESZÉLY elektromos áram következtében

- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A szükséges javításokat bízza szakszervizre. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a terméket használó személyre nézve.

A masszírozó készülék ugyan védett a víz behatolása ellen, a töltőtál azonban nem. A készülék feltöltése előtt az alábbiakat vegye figyelembe:

- A töltőtálat ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn. Neerontse meg a töltőtálat nedves kézzel, és ne üzemeltesse a szabadban vagy magas páratartalmú helyiségekben. Ne töltsen a készüléket víz közelében. Csak a száraz masszírozó készüléket tegye a töltőtálra. Különben áramütés veszélye áll fenn!
- Ha a töltőtál a töltés közben vízbe esne, akkor ne nyúljon utána! Húzza ki azonnal a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból. Várja meg, hogy a készülék, a mikro-USB-töltőkábel és a hálózati adapter teljesen megszáradjon, csak ezután dugja be ismét a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatba.
- Csak egy megfelelő USB-hálózati adaptert (lásd „Műszaki adatok”) használjon. Csak olyan szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a töltőtálat, amelynek a hálózati feszültsége megegyezik a termék műszaki adataival.

- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból, ha a töltés során üzemzavar lép fel, illetve ha a készülék teljesen fel van töltve. A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati adaptert.
- Ne használja a készüléket, ha a készüléken vagy a töltőtálon sérülés látható, vagy ha leesett.
- Soha ne üzemeltesse a készüléket felügyelet nélkül.


VIGYÁZAT - égési sérülések/tűzveszély

- A termék lítiumion akkumulátort tartalmaz. Az akkumulátort saját kezűleg nem lehet és nem szabad kicserélni vagy kiszerezni. Az akkumulátor szakszerűtlen cseréje robbanásveszélyes. Csak ugyanolyan vagy egyenértékű akkumulátor típusra lehet kicserélni. Ha az akkumulátor tönkrement, akkor forduljon szakemberhez.
- Az akkumulátorokat szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.
- A készülék feltöltéséhez kizárólag az eredeti töltőtálat használja.


FIGYELEM – sérülések és anyagi károk

- Óvja a terméket ütődéstől, leeséstől, portól, nedves-ségtől, közvetlen napsugárzástól és szélsőséges hőmérsékletektől.
- A termék tisztításához ne használjon súroló vagy maró hatású tisztítószeret, illetve kemény keféket és hasonlókat.
- Csak az eredeti tartozékokat használja.
- Nem teljesen kizárt, hogy egyes lakkok, műanyagok vagy különböző bútorápoló szerek a készülék csúszásgátló talpait károsítják és felpuhítják. Szükség esetén helyezzen a termék alá csúszásmentes alátétet, így elkerülhető, hogy kellemetlen nyomok maradjanak a bútoron.

Termékrajz (tartozékok)

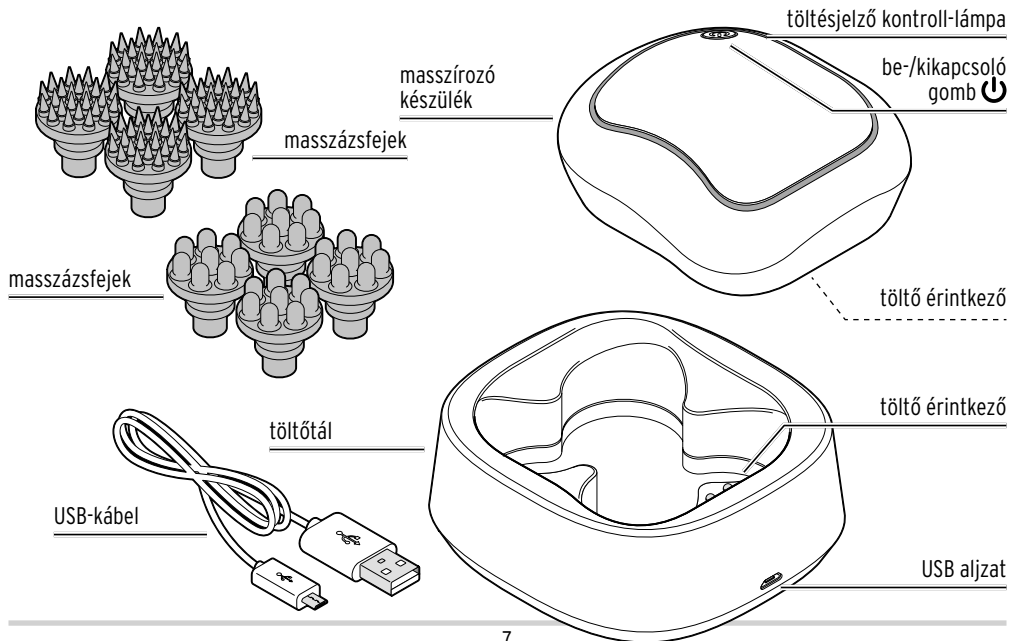

Akkumulátor feltöltése

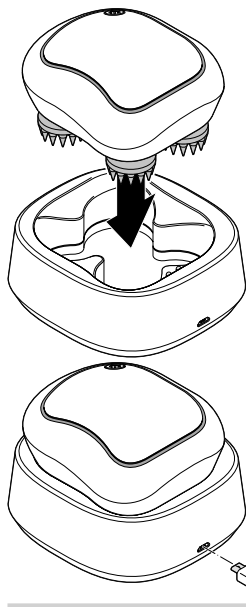

Szüksége lesz egy USB-hálózati adapterre (nem tartozék).

1. Helyezze fel a masszírozó készüléket a töltőtálra. A készülék töltő érintkezőinek a töltőtál érintkezőin kell elhelyezkedniük.
2. Csatlakoztassa a töltőtálat az áramhálózathoz.

A kontroll-lámpák a töltés közben villognak.

Amint az akkumulátor teljesen feltöltődött, a kontroll-lámpák folyamatosan világítanak.

Az üres akkumulátor töltési ideje: kb. 2 -3 óra

Üzemidő teljesen feltöltött akkumulátorral:

kb. 1,5 óra



Az akkumulátort a sérülések elkerülése érdekében csak félig feltöltve szállítjuk. Az első használat előtt tölts fel teljesen az akkumulátort.

Az akkumulátor kapacitása szobahőmérsékleten tart a leghosszabb ideig.

Az akkumulátort +10 és +40 °C közötti környezeti hőmérsékleten tölts.

Az akkumulátor maximális kapacitásának megtartása érdekében, 2-3 havonta tölts fel teljesen az akkumulátort akkor is, ha nem használja a terméket.

Használat

Be-/kikapcsolás

1. Vegye le a masszírozó készüléket a töltőtálról.
A kontroll-lámpák kialszanak.

2. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot .

A készülék mindig a leglassabb sebességgel indul el, a kontroll-lámpák világítanak.

3. A sebesség megváltoztatásához nyomja meg újra röviden a be-/kikapcsoló gombot  ...


A sebesség egymás után ugrik ...

... a lassúról (a kontroll-lámpa 1-szer villog) a

... közepesre (a kontroll-lámpa 2-szer villog), a


... gyorsra (a kontroll-lámpa 3-szor villog), majd újra az elejére.

▷ A készülék bekapcsolásához tartsa lenyomva kb. 3 másodpercig a be-/kikapcsoló gombot .

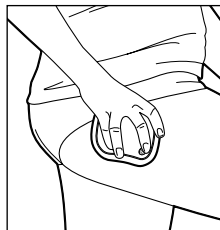

4. Helyezze a készüléket a masszírozandó testrészre. A masszírozás intenzitásának megváltoztatásához enyhébben vagy erősebben nyomja rá a bőrrre a készüléket.

Masszázsfejek cseréje

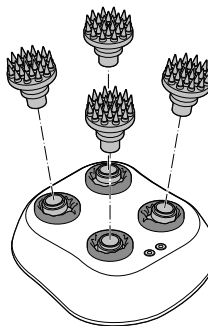

▷ Egyszerűen felfelé húzza le a masszázsfeket, majd húzza rá a másik fejet.

Tisztítás és fertőtlenítés

FIGYELEM - anyagi károk

- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószeret. Ne használjon kereskedelmi forgalomban kapható fertőtlenítőszeret sem.

- ▷ A masszírozó készüléket a felhelyezett fejekkel folyó víz alatt lemoshatja.
- ▷ A masszázsfejeket megtisztíthatja meleg vízzel és egy kevés kereskedelmi forgalomban kapható mosogatószerrel.
- ▷ Szükség esetén törölje le a töltőtálat egy vízzel enyhén benedvesített kendővel.
- ▷ A fertőtlenítéshez letörölheti a masszázsfejeket egy etilalkohollal benedvesített kendővel.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a beszerelt akkumulátor értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



Az **elem és az akkumulátor** nem háztartási hulladék!

Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.

Figyelem! Ebben a készülékben egy olyan akkumulátor található, amely biztonsági okokból szilárdan be van építve és a burkolat megrongálása nélkül nem lehet eltávolítani. A szakszerűtlen eltávolítás biztonsági kockázatot jelent. Ezért a készüléket egészben adja le egy gyűjtőhelyen, ahol a készüléket és az akkumulátort szakszerűen ártalmatlanítják.

Műszaki adatok

Modell:	622 403
Akkumulátor:	lítiumion (az UN 38.3 alapján tesztelve) 3,7 V  1200 mAh Névleges energia: 5 Wh (a  jel egyenáramot jelent)
USB bemenet:	5 V  1 A
Töltési idő:	kb. 2-3 óra
Üzemidő:	max. 90 perc (teljesen feltöltött akkumulátorral)
Érintésvédelmi osztály:	III 
Teljesítmény:	5 W
Védelmi osztály:	IPX7 (időszakos vízbe merítés ellen védett)

Környezeti
hőmérséklet: +10 és +40 °C között

Gyártó:
Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a,
6361 HB Nuth, The Netherlands (Hollandia)



Cikkszám: 622 403
